

|          |                         |             |    |
|----------|-------------------------|-------------|----|
| 福山医療センター | 文書名                     | 文書番号        | 版数 |
| 臨床検査科    | 検査案内<br>(一次サンプル採取マニュアル) | QT-COL-0001 | 12 |

### 3.3 一般検査


#### 3.3.1 項目一覧表

| 検査項目 | 必要量<br>(mL) | 検査<br>材料 | 採取容器       | 検査方法                                        | 生物学的<br>基準範囲     | 単位   | 所要時間  | 備考             |
|------|-------------|----------|------------|---------------------------------------------|------------------|------|-------|----------------|
| 色調   | 12.0        | 尿        | 尿コップ<br>WC | 分光吸収測定法<br>目視法(小型機)                         |                  |      | 30 分  | ※1             |
| 混濁   |             |          |            | 分光吸収測定法<br>目視法 (小型機)                        |                  |      |       | ※1             |
| 比重   |             |          |            | 屈折率測定法<br>陽イオンによるメタクロマジー<br>法(小型機)          | 1.005~<br>1.030  |      |       | ※1             |
| pH   |             |          |            | 試験紙法<br>(分光反射測光法)                           | 4.5~8.0          |      |       | ※1             |
| 蛋白   |             |          |            | 試験紙法<br>(分光反射測光法)                           | (－)              |      |       | ※1             |
| ブドウ糖 |             |          |            | 試験紙法<br>(分光反射測光法)                           | (－)              |      |       | ※1             |
| KET  |             |          |            | 試験紙法<br>(分光反射測光法)                           | (－)              |      |       | ※1             |
| URO  |             |          |            | 試験紙法<br>(分光反射測光法)                           | (±)              |      |       | ※1             |
| BIL  |             |          |            | 試験紙法<br>(分光反射測光法)<br>イクトテスト<br>(ジアゾカップリング法) | (－)              |      |       | ※1             |
| 潜血   |             |          |            | 試験紙法<br>(分光反射測光法)                           | (－)              |      |       | ※1             |
| 亜硝酸塩 |             |          |            | 試験紙法<br>(分光反射測光法)                           | (－)              |      |       | ※1             |
| 白血球  |             |          |            | 試験紙法<br>(分光反射測光法)                           | (－)              |      |       | ※1             |
| 尿沈渣  |             |          |            | 機械)フローサイト<br>メトリー法                          | 赤血球 ≤4<br>白血球 ≤4 | /HPF | 30 分  | 時間外不可<br>※1 ※2 |
|      |             |          |            | 目視)鏡検法                                      | 赤血球 ≤4<br>白血球 ≤4 | /HPF | 1 時間半 | 時間外不可<br>※1    |

※1 尿検査はできるだけ早く提出する。遅くとも採取後 4 時間以内に提出する。

※2 必ず鏡検法での依頼は「尿沈渣目視」の依頼コメントを入力する。

該当なしは

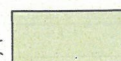

|          |                         |             |    |
|----------|-------------------------|-------------|----|
| 福山医療センター | 文書名                     | 文書番号        | 版数 |
| 臨床検査科    | 検査案内<br>(一次サンプル採取マニュアル) | QT-COL-0001 | 12 |

| 検査項目        | 必要量  | 検査材料 | 採取容器     | 検査方法     | 生物学的基準範囲                   | 単位    | 所要時間 | 備考                      |
|-------------|------|------|----------|----------|----------------------------|-------|------|-------------------------|
| HCG 定性      | 1.0  | 尿    | 尿コップ WC  | イムノクロマト法 | (-)                        |       | 30 分 | 25mIU/mL 以上で (+)        |
| 尿中薬物スクリーニング | 10   | 尿    | 尿コップ WC  | イムノクロマト法 | (-)                        |       | 1 時間 | ※3                      |
| 便潜血免疫法      | 1.0g | 便    | 採便セット W2 | イムノクロマト法 | ヘモグロビン:(-)<br>トランスフェリン:(-) |       | 40 分 | ※8<br>※4                |
| 虫卵(直接法)     | 1.0g | 便    | W1       | 直接法      | (-)                        |       | 半日   | ※8                      |
| 蟯虫卵セロテープ法   |      |      | セロファンテープ | 鏡検法      | (-)                        |       | 1 時間 | 早朝排便前に採取。<br>時間外不可      |
| 脂肪染色        | 1.0g | 便    | W1       | ズダンⅢ染色   | (-)                        |       | 1 時間 | ※8                      |
| 好酸球         | 1.0g | 便    | W1       | 鏡検法      | 認めず                        |       | 半日   | ※8                      |
| 髄液一般検査      | 3mL  | 髄液   | U1       | 鏡検法      | 細胞数≤5                      | /μL   | 1 時間 | すみやかに提出。                |
| 蛋白定量        |      |      |          | ヒコロレット法  | 10~35                      | mg/dL |      |                         |
| 糖定量         |      |      |          | ヘキサゼ法    | 50~80                      | mg/dL |      |                         |
| 塗抹細胞分類      |      |      | U1       | 鏡検法      |                            |       | 半日   | すみやかに提出。<br>時間外不可<br>※5 |

尿中薬物スクリーニング項目一覧。


|                            |                   |                   |                    |                    |                   |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| AMP<br>(アンフェタミン類)          | CQC<br>(コカイン系麻薬)  | THC<br>(大麻)       | BZO<br>(ベンゾジアゼピン類) | TCA<br>(三環系抗うつ剤)   | BAR<br>(バルビツール酸類) |
| MDMA<br>(メチレンジオキシメタンフェタミン) | OPI<br>(オピオイド系麻薬) | PCP<br>(フェンシクリジン) | OXY<br>(オキシコドン類)   | PPX<br>(プロピキソフェン類) |                   |

※3 保険収載項目ではありません。

※4 できるだけ早く提出する。外来の場合は冷蔵所保存で3日以内に提出する。

※5 細胞数 100/μL 以上で実施する。

該当なしは

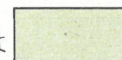

|          |                         |             |    |
|----------|-------------------------|-------------|----|
| 福山医療センター | 文書名                     | 文書番号        | 版数 |
| 臨床検査科    | 検査案内<br>(一次サンプル採取マニュアル) | QT-COL-0001 | 12 |

| 検査項目       | 必要量  | 検査材料 | 採取容器        | 検査方法 | 生物学的<br>基準範囲                                                                | 単位                                      | 所要<br>時間 | 備考                 |
|------------|------|------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|--------------------|
| 胸水検査       | 10mL | 胸水   | U1          | 鏡検法  |                                                                             |                                         | 半日       | すみやかに提出。<br>※8     |
| 腹水検査       | 10mL | 腹水   | U1          | 鏡検法  |                                                                             |                                         | 半日       | すみやかに提出。<br>※8     |
| 心嚢液検査      | 10mL | 心嚢液  | U1          | 鏡検法  |                                                                             |                                         | 半日       | すみやかに提出。<br>※8     |
| 洗浄液検査      | 50mL | 洗浄液  | Z1          | 鏡検法  |                                                                             |                                         | 半日       | すみやかに提出。<br>※8     |
| 関節液検査      | 10mL | 関節液  | U1          | 鏡検法  |                                                                             |                                         | 1 時間     | すみやかに提出。<br>※8     |
| 精液一般<br>検査 | 全量   | 精液   | 滅菌コップ       | 鏡検法  | 精液量 $\geq$ 2.0<br>精子数 $\geq$ 20<br>精子運動率 $\geq$<br>50<br>正常形態率 $\geq$<br>15 | mL<br>$\times 10^6/\text{mL}$<br>%<br>% | 1 時間     | 要予約<br>時間外不可<br>※6 |
| 鼻汁好酸球      | 適量   | 鼻汁   | スライド<br>ガラス | 鏡検法  | (-)                                                                         |                                         | 1 時間     | ※8<br>※7           |

※6 室温から 37℃で保存し 1 時間以内に提出する。

該当なしは

※7 患者氏名を記入したスライドガラスを標本ケースに入れて提出する。

※8 時間外の提出は可能ですが、検査の実施は後日の日常業務時間帯になります。  
時間経過により参考値として報告させていただく場合があります。

★採取容器については採血管・採取容器一覧（文書番号：LI-COL-0001）を参照のこと。